



Des solutions de
cœlioscopie personnalisées

Relevez le niveau de vos interventions par cœlioscopie

En standardisant vos interventions par cœlioscopie pour la cholécystectomie, l'appendicectomie et la cure de hernie, vous veillez à l'efficacité et à la qualité permanentes des prestations de votre équipe.

Cependant, des économies supplémentaires seront inévitables et il faudra augmenter encore le nombre d'interventions.

Travailler aux côtés de nos clients, tout en étant à leur écoute nous a permis de comprendre à quel point une solution adaptée aux interventions par cœlioscopie pouvait vous simplifier le travail, équilibrer les coûts et vous aider à atteindre vos objectifs sur le plan chirurgical.





Comme équipe de professionnels passionnés par les soins, nous ambitionnons les meilleurs soins pour les patients, et en même temps une efficacité et rentabilité accrues

Des solutions de cœlioscopie personnalisées

Tout ce dont votre équipe a besoin



NOUVEAU

Un soutien expérimenté en cœlioscopie

Nos Account Managers affichent de nombreuses années d'expérience en interventions par cœlioscopie et vous aideront à définir et à évaluer votre solution la plus efficace au niveau du temps et des coûts.



NOUVEAU

Instruments de cœlioscopie de haute qualité


Instruments à usage unique, disponibles comme composants stériles ou inclus dans les troussees composites Mölnlycke®:

- Choix complet de trocarts
- Choix étendu de pinces et dissecteurs monopolaires, avec deux modèles de poignées selon vos préférences
- Crochet L monopolaire
- Ciseaux de cœlioscopie, toujours acérés
- Sac d'extraction détachable

Champs tout-en-un et composants de troussees

Un choix complet de dispositifs de cœlioscopie, par exemple:

- **NOUVEAU** • **Champs tout-en-un**
- Blouses opératoires
- Safety devices
- Suture / pansements
- Aiguille de Veress
- Tubes d'insufflation
- Kit d'aspiration et d'irrigation
- Housse de caméra
- Solution anti-buée
- Filtre à fumée

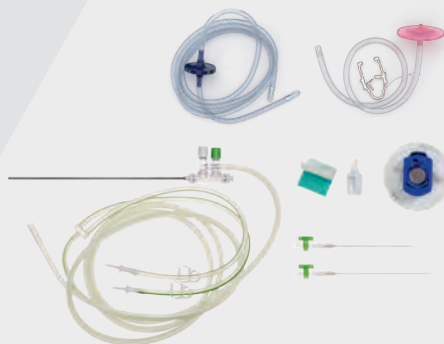

Une solution complète pour une efficacité accrue

Notre équipe travaille en étroite collaboration avec vous pour définir et évaluer la solution la plus adaptée à vos besoins, à partir de notre nouvelle gamme d'instruments de coelioscopie et de notre offre chirurgicale existante. Le résultat ? Une solution de coelioscopie personnalisée, avec tout ce dont vous avez besoin pour chaque intervention dans un conditionnement unique, pratique et efficace au niveau des coûts.



40% D'ÉCONOMIE DU TEMPS DE PRÉPARATION. D'AVANTAGE DE PROCÉDURES PEUVENT DONC ÊTRE EFFECTUÉES.

L'emploi des trousse composites Mölnlycke® vous permet:

- de réduire le temps de préparation de 40%*
- d'augmenter le nombre d'interventions
- de contribuer à réduire les dépenses de produits et les coûts logistiques

« Le nombre de procédures a augmenté de 18 % et nous avons sauvé 1 060 heures globalement, ce qui équivaut à une économie de 51 000 euros »

Hartmut Freckmann, Infirmier en chef de bloc opératoire, Allemagne, à propos des trousse composites Mölnlycke®.

Des solutions de coelioscopie personnalisées


Les chirurgiens préfèrent clairement les instruments Mölnlycke®

Au cours d'une récente évaluation conduite en Allemagne, en Suède et au Royaume-Uni, 21 chirurgiens cœlioscopique ont été invités à essayer les nouveaux instruments spécialisés de Mölnlycke® pour les comparer à trois des principaux concurrents du marché*. Afin de rendre leur appréciation aussi objective que possible, les participants avaient les yeux bandés et se concentraient uniquement sur la sensation de prise en main.

Le résultat ? Une préférence marquée pour les nouveaux instruments Mölnlycke®.

Principes de cotation et critères d'évaluation

Une cotation cohérente sur une échelle analogique de 1 à 6 a été utilisée, pour éviter le choix par défaut d'un score moyen. 6 désignait le meilleur score, 1 le moins bon.

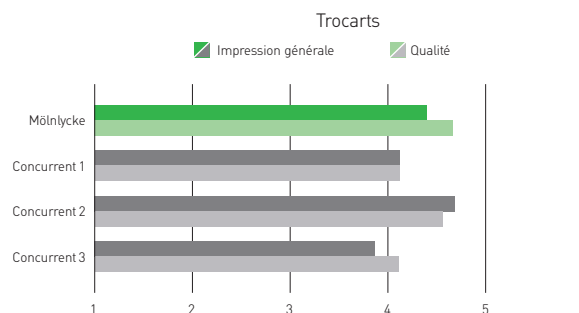

La qualité des trocarts Mölnlycke® était évaluée comme étant meilleure que celle du leader du marché

Une solution avec des avantages pour toute l'équipe

Nos clients nous affirment que les trousse personnalisées offrent de nombreux avantages. Il n'existe pas de solution universelle – et chaque intervention, chaque hôpital a sa configuration favorite, à laquelle nous répondons par la personnalisation de nos trousse composites Mölnlycke®.

- **Gain de temps:** Moins de temps de préparation, moins de temps d'ouverture et d'installation, pour plus d'interventions effectuées (jusqu'à 40 % de temps global de préparation** en moins, de la commande à l'élimination des déchets)
- **Risques d'infection réduits***** étant donné la moindre quantité d'emballages à ouvrir
- **Moins d'emballages** pour moins de déchets
- **Facilite le travail de l'équipe du bloc opératoire**



*Étude clinique simple-aveugle multicentrique des instruments de cœlioscopie fréquemment utilisés. Rapport non publié. Mölnlycke, 2016.

**Référence : Greiling, M. Une étude de cas multinationale sur l'évaluation et la quantification du gain de temps apporté par l'utilisation de trousse composites en vue d'une plus grande efficacité du bloc opératoire. Données présentées lors du 23e Congrès de l'Association européenne des Dirigeants d'hôpital, Zurich, Suisse, septembre 2010 (affiche).


***Référence: Duffy, E. & Smith A. The benefits of using customised procedure packs to increase day surgery unit efficiency - a time and motion study, octobre 2005.

« Très léger, très facile d'emploi. Bonne rotation et bonne prise en main. J'apprécierais de travailler avec cet instrument. »


Un chirurgien allemand à propos nos pinces de cœlioscopie

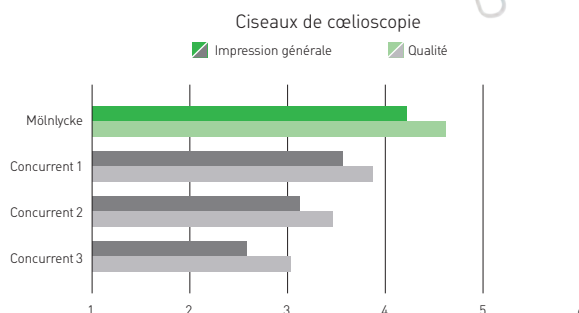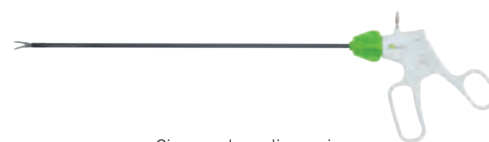

Les ciseaux Mölnlycke® surpassent les produits concurrents à tous les niveaux

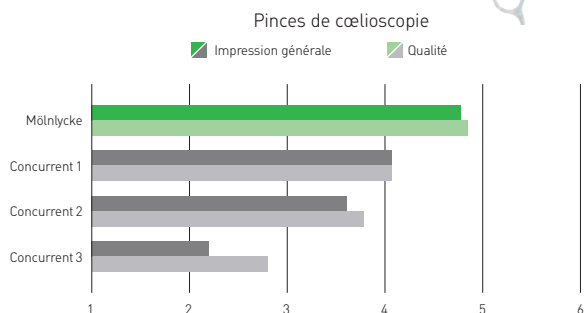

La pince à dissection Maryland de Mölnlycke® est clairement supérieure

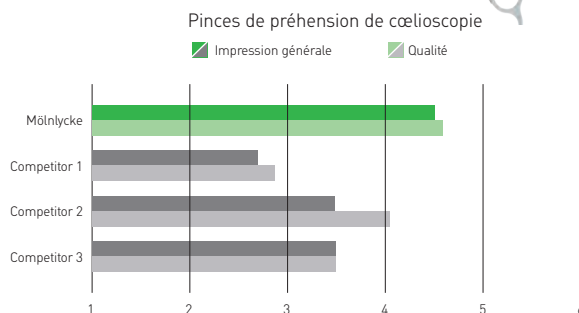

Les pinces à poignée réutilisable de Mölnlycke® obtiennent les meilleurs scores



Au plus de composants dans la trousse, au plus grand l'avantage pour votre équipe !

Laissez-nous vous aider ainsi
que votre équipe





Au plus de composants dans la trousse, au plus que vous y gagnez

Notre équipe dévouée vous aidera à identifier la solution la plus pertinente pour vous et votre équipe, ainsi qu'à vous concentrer sur les éléments que vous souhaitez améliorer.

Nous pouvons aussi collaborer avec vous et votre équipe en vue de dynamiser le processus de changement pour que vous puissiez profiter de la pleine valeur de votre solution.

Une fois votre solution personnalisée définie, nous pouvons quantifier sa valeur économique sur la base d'études scientifiques, avant de vous remettre un rapport complet.

Notre calculateur de valeur peut vous donner une idée des économies réalisables.

molnlycke.com/value-calculator



Des solutions de cœlioscopie personnalisées

Instruments

Votre équipe cherche à constamment améliorer l'efficacité et le soins des patients. Nous la comprenons. C'est pourquoi nous avons adapté nos solutions de cœlioscopie à vos besoins. Vous avez la possibilité de créer votre propre combinaison de trocarts, ciseaux monopolaires, instruments monopolaires, électrodes à crochet L et sacs d'extraction détachables Mölnlycke®. Nous emballons tout ce dont votre équipe a besoin dans les trousse composites Mölnlycke® qui vous apportent un gain de temps et de coût.

Sac d'extraction détachable

- Disponibles en plusieurs tailles pour le prélèvement de tous les types d'organes et de tissus
- Sac à anneau auto-ouvrant pour un prélèvement rapide et aisé de spécimens
- Amélioration de l'anneau métallique pour un déploiement simple ainsi qu'une ouverture plus large permettant de prélever les spécimens les plus difficiles



N° de réf.	Description	Taille	Taille du sac	Volume	Pièces/disp.
899102	Sac d'extraction détachable	10mm	9x14,5cm	250ml	5
899103	Sac d'extraction détachable	10mm	13x18cm	600ml	5
899112	Sac d'extraction détachable	12mm	19x23cm	1150ml	5
899104	Sac d'extraction détachable	15mm	19x23cm	1150ml	5

Électrode monopolaire à crochet L

- L'électrode monopolaire à crochet L 5mm autorise une dissection et coagulation précises et contrôlées des vaisseaux et tissus
- Un instrument à usage unique pratique qui garantit la stérilité et une activation efficace du courant monopolaire, évitant la brûlure des tissus adjacents
- Poignée légère et ergonomique pour une dissection précise et contrôlée des tissus



N° de réf.	Description	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899100	Électrode monopolaire à crochet L	5mm	33cm	10
899101	Électrode monopolaire à crochet L avec câble	5mm	33cm	10



Ciseaux monopolaires

- Pour une dissection, coagulation et section précises et contrôlées des vaisseaux et tissus
- Instrument à usage unique pratique et toujours acéré, évitant les coûts de retraitement et de stérilisation
- Mors Metzenbaum acérés assurant une découpe précise sur toute la longueur de la lame



N° de réf.	Description	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899216	Ciseaux monopolaires – Metzenbaum	5mm	33cm	10
899217	Ciseaux monopolaires – Metzenbaum mini	5mm	33cm	10
899218	Ciseaux monopolaires – Metzenbaum	5mm	45cm	10


Aiguille de Veress



- Pointe biseautée acérée pour une pénétration simple et sûre dans la paroi abdominale
- Stylet à ressort émettant un clic sensible et audible pour garantir un positionnement correct
- Une fois que l'aiguille a pénétré les tissus abdominaux, elle est protégée afin de ne pas endommager les organes adjacents

N° de réf.	Description	Longueur	Pièces/disp.
899105	Aiguille de Veress	12cm	25
899106	Aiguille de Veress	15cm	25

Kit d'aspiration et d'irrigation

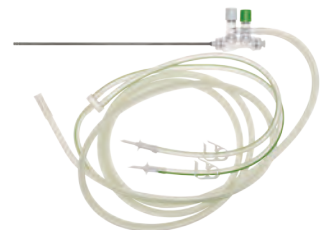

- Conception ergonomique. La pièce à main peut être manipulée avec chaque main
- Pièce à main transparente pour une visibilité inaltérée
- Valve anti-retour pour éviter le reflux de solution saline
- Tubes flexibles sans DEHP pouvant être facilement découplés

N° de réf.	Description	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899107	Kit d'aspiration et d'irrigation double pointe	5mm	33cm	10
899108	Kit d'aspiration et d'irrigation double pointe	5mm	45cm	10
899109	Sonde d'aspiration et d'irrigation	10mm	33cm	10

Des solutions de cœlioscopie personnalisées


Trocarts

- Une gamme complète de trocarts ergonomiques, assurant un accès aisé et sûr dans la cavité péritonéale
- Canule transparente et nervurée pour une bonne visualisation des instruments et une fixation efficace sur la paroi abdominale
- Joint universel robuste compatible avec des instruments de 5-12mm* et assurant le maintien du pneumopéritoine



Trocart à lame protégée

N° de réf.	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899300	5mm	70mm	5
899301	5mm	100mm	5
899302	11mm	100mm	5
899303	11mm	150mm	5
899304	12mm	100mm	5
899305	12mm	150mm	5

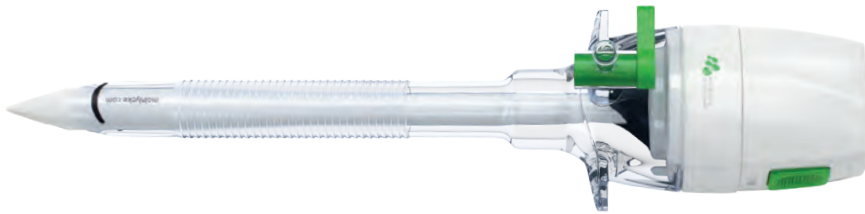

Trocart sans lame à dilatation

N° de réf.	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899308	5mm	70mm	5
899309	5mm	100mm	5
899310	11mm	100mm	5
899311	11mm	150mm	5
899312	12mm	100mm	5
899313	12mm	150mm	5
899336	15mm	100mm	5



Trocart optique – poignée pistolet


N° de réf.	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899314	11mm	100mm	5
899315	12mm	100mm	5

*Pour le trocart de 12mm de diamètre




Trocart optique

N° de réf.	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899316	5mm	70mm	5
899317	5mm	100mm	5
899324	5mm	150mm	5
899318	11mm	100mm	5
899325	11mm	150mm	5
899319	12mm	100mm	5
899326	12mm	150mm	5

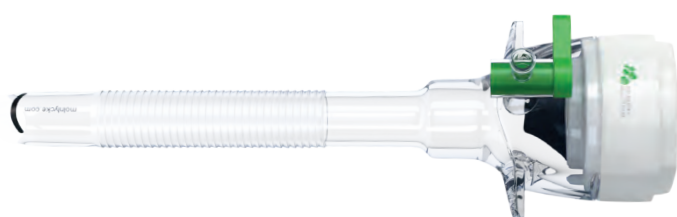

Canule universelle

N° de réf.	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899320	5mm	70mm	5
899321	5mm	100mm	5
899322	11mm	100mm	5
899323	12mm	100mm	5

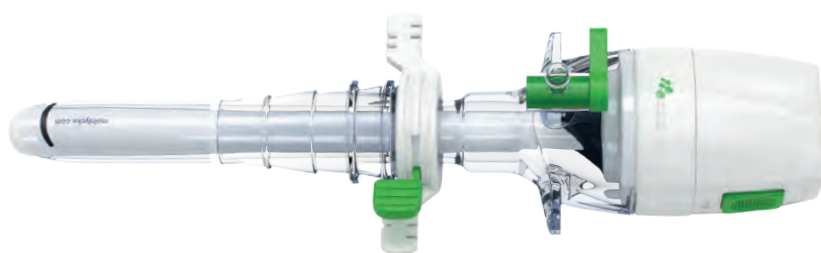

Trocart de Hasson

N° de réf.	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899306	11mm	100mm	5
899307	12mm	100mm	5



Trocart optique à ballonnet

N° de réf.	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899330	5mm	70mm	5
899327	5mm	100mm	5
899331	11mm	100mm	5
899328	12mm	100mm	5



Trocart de Hasson à ballonnet

N° de réf.	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899329	12mm	100mm	5

Instruments monopolaires

- Un assortiment complet de configurations de pointes de mors pour toutes les interventions chirurgicales
- Pointes de mors robustes à ouverture large et double articulation pour une application optimale en intervention
- Une gamme complète d'instruments monopolaires 5mm à usage unique et de qualité supérieure, avec deux modèles de poignées, proposant aux chirurgiens un choix et confort ultimes



Type usage unique



N° de réf.	Description	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899200	Pince de préhension droite avec cliquet	5mm	33cm	10
899201	Pince à dissection Maryland	5mm	33cm	10
899202	Pince de préhension Clinch avec cliquet	5mm	33cm	10
899203	Pince de préhension Babcock avec cliquet	5mm	33cm	10
899204	Pince de préhension à dents de rat avec cliquet	5mm	33cm	10
899205	Pince de préhension bec de canard avec cliquet	5mm	33cm	10
899206	Pince de préhension intestinale avec cliquet	5mm	33cm	10
899207	Pince de préhension droite avec cliquet - ajourée	5mm	33cm	10

Type réutilisable



N° de réf.	Description	Taille	Longueur	Pièces/disp.
899208	Pince de préhension droite avec cliquet	5mm	33cm	10
899209	Pince à dissection Maryland	5mm	33cm	10
899210	Pince de préhension Clinch avec cliquet	5mm	33cm	10
899211	Pince de préhension Babcock avec cliquet	5mm	33cm	10
899212	Pince de préhension à dents de rat avec cliquet	5mm	33cm	10
899213	Pince de préhension bec de canard avec cliquet	5mm	33cm	10
899214	Pince de préhension intestinale avec cliquet	5mm	33cm	10
899215	Pince de préhension droite avec cliquet - ajourée	5mm	33cm	10

Composants de trousse de cœlioscopie

Vous pouvez personnaliser vos trousse de cholécystectomie, appendicectomie et cure de hernie grâce à un assortiment de composants de qualité. Vous avez aussi la possibilité d'inclure les blouses opératoires, gants, dispositifs de sécurité et pansements à vos trousse pour une hausse supplémentaire d'efficacité et de rentabilité.

Les produits affichés représentent une partie limitée de l'assortiment complet.



Tubes d'insufflation

N° de réf.*	Description
2318957-00	Tube d'insufflation avec filtre OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/MLL
2318996-00	Tube d'insufflation avec filtre OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/Canal
2318997-00	Tube d'insufflation avec filtre OD 26Ch ID 18Ch 250cm MLL/Raccord Wolf
2319000-00	Tube d'insufflation avec filtre OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/22 mm/15 mm raccord
2319001-00	Tube d'insufflation avec filtre OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/Canal blanc
2318958-00	Tube d'insufflation avec filtre OD 26Ch ID 18Ch 300cm LL/MLL
2318998-00	Tube d'insufflation avec filtre OD 26Ch ID 18Ch 300cm MLL/MLL adaptateur LL/LL



Solution anti-buée

N° de réf.*	Description
2315127-00	Solution anti-buée



Housse de caméra

N° de réf.*	Description
2318643-00	Champ coupleur caméra 15x250cm avec système de verrouillage. Bague d'insertion
2318627-00	Champ coupleur caméra 15x250cm avec cliquet de verrouillage. Bague d'insertion
2308481-00	Champ coupleur caméra 18x250cm avec stick de transfert



Filtre à fumée

N° de réf.*	Description
2318481-00	Filtre à fumée avec pince à champs



Câbles pour des instruments monopolaires

N° de réf.*	Description	Pièces/disp.
899110	Câble universel instrument monopolaire 4mm	40
899111	Câble universel instrument monopolaire 8mm	40

*Numéros de référence pour produit en trousse composites Mölnlycke®.

Champs

La gamme de cœlioscopie BARRIER® a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques de la discipline. L'inflation de l'abdomen, le changement de position pendant l'opération, l'utilisation de tubes et d'instruments et la position de lithotomie posent des exigences particulières sur le modèle de champ utilisé. Les nouveaux champs de la gamme témoignent de notre attention du détail et de notre souci d'optimiser la conception pour satisfaire aux exigences rigoureuses de la chirurgie cœlioscopique.

Nouveaux champs de cœlioscopie BARRIER® pour les interventions de cholécystectomie, appendicectomie et cure de hernie

Jambières extra-

longues assurant une pose sécurisée du drapage pour tous les types de supports de jambe, avec :

- bande adhésive intégrée pour l'ajustement de la longueur
- côtés transparents permettant de contrôler visuellement les extrémités et d'assurer un bon positionnement

Position de lithotomie



Poches profondes adaptées aux instruments de cœlioscopie

Quatre passe-tubulures intégrés pour un espace de travail organisé

Contours élastiques et adhésifs BARRIER® Flex garantissant une bonne étanchéité lorsque l'abdomen est gonflé


Position allongée





Les nombreux avantages des champs tout-en-un :

- Drapage facile et efficace par une seule personne
- Gain de temps – installation 3 fois plus rapide qu'un champ universel*
- Moins de composants, moins d'étapes, moins de risques de contamination
- Disponible comme composant des trousses Mölnlycke®

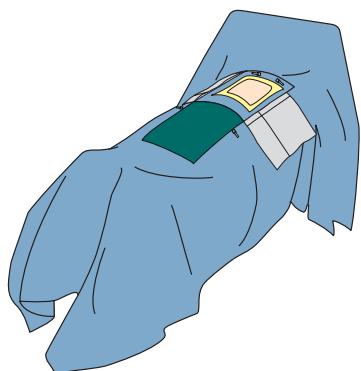


Champ de cœlioscopie pour position allongée



N° de réf. Composant de trousses composites Mölnlycke®

954226	Champ de cœlioscopie 200/250x340cm, ouv. adh. 32x30cm
--------	---

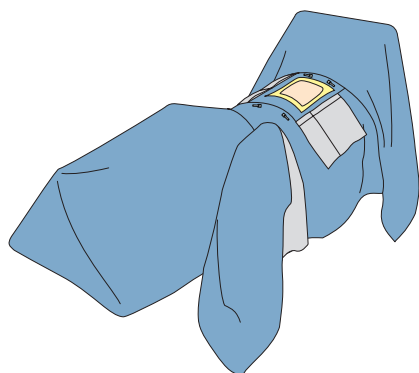


Champ de cœlioscopie pour position de lithotomie



N° de réf. Composant de trousses composites Mölnlycke®

944206	Champ de cœlioscopie 250/200/300x260cm, ouv. adh. 32x30cm
--------	---

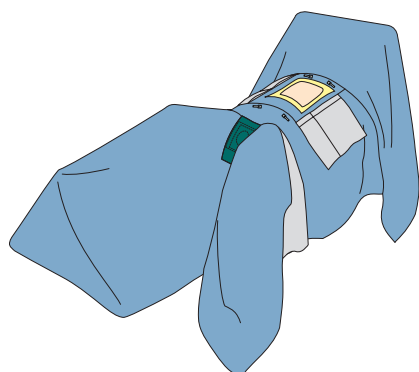

Champ de cœlioscopie avec ouverture abdo-périnéale pour position de lithotomie



N° de réf. Composant de trousses composites Mölnlycke®

944201	Champ de cœlioscopie 250/200/300x260cm, ouv. adh. 32x30cm and 10x13cm
--------	---

*Vidéo comparative - Drapage avec champ universel vs. champ tout-en-un. Rapport non publié. Mölnlycke, 2016.

Votre guide de sélection des bons composants pour les interventions suivantes

Tous les produits peuvent être intégrés dans une trousse composite Mölnlycke® personnalisée.

Cholécystectomie sous cœlioscopie

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Champ de cœlioscopie | <input type="checkbox"/> Solution anti-buée | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-op |
| <input type="checkbox"/> Champs supplémentaires | <input type="checkbox"/> Boîte à aiguilles | <input type="checkbox"/> Plateaux et bols |
| <input type="checkbox"/> Blouses opératoires | <input type="checkbox"/> Extracteur de lame | <input type="checkbox"/> Instrument monopolaire – pince |
| <input type="checkbox"/> Produits de gaze | <input type="checkbox"/> Plateau de transfert d'instruments | <input type="checkbox"/> Instrument monopolaire – dissecteur |
| <input type="checkbox"/> Seringues | <input type="checkbox"/> Bistouri sécurisé | <input type="checkbox"/> Ciseaux monopolaires |
| <input type="checkbox"/> Aiguilles | <input type="checkbox"/> Champ Time Out | <input type="checkbox"/> Électrode monopolaire à crochet L |
| <input type="checkbox"/> Tubes d'insufflation | <input type="checkbox"/> Tapis anti-dérapant | <input type="checkbox"/> Trocarts |
| <input type="checkbox"/> Aiguille de Veress | <input type="checkbox"/> Housse de caméra | <input type="checkbox"/> Canules universelles |
| <input type="checkbox"/> Kit d'aspiration et d'irrigation | <input type="checkbox"/> Instrument métallique | <input type="checkbox"/> Sac d'extraction détachable |
| <input type="checkbox"/> Filtre à fumée | <input type="checkbox"/> Sutures | <input type="checkbox"/> Câble monopolaire |

Appendicectomie sous cœlioscopie

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Champ de cœlioscopie | <input type="checkbox"/> Solution anti-buée | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-op |
| <input type="checkbox"/> Champs supplémentaires | <input type="checkbox"/> Boîte à aiguilles | <input type="checkbox"/> Plateaux et bols |
| <input type="checkbox"/> Blouses opératoires | <input type="checkbox"/> Extracteur de lame | <input type="checkbox"/> Instrument monopolaire – pince |
| <input type="checkbox"/> Produits de gaze | <input type="checkbox"/> Plateau de transfert d'instruments | <input type="checkbox"/> Instrument monopolaire – dissecteur |
| <input type="checkbox"/> Seringues | <input type="checkbox"/> Bistouri sécurisé | <input type="checkbox"/> Ciseaux monopolaires |
| <input type="checkbox"/> Aiguilles | <input type="checkbox"/> Champ Time Out | <input type="checkbox"/> Électrode monopolaire à crochet L |
| <input type="checkbox"/> Tubes d'insufflation | <input type="checkbox"/> Tapis anti-dérapant | <input type="checkbox"/> Trocarts |
| <input type="checkbox"/> Aiguille de Veress | <input type="checkbox"/> Housse de caméra | <input type="checkbox"/> Canules universelles |
| <input type="checkbox"/> Kit d'aspiration et d'irrigation | <input type="checkbox"/> Instrument métallique | <input type="checkbox"/> Sac d'extraction détachable |
| <input type="checkbox"/> Filtre à fumée | <input type="checkbox"/> Sutures | <input type="checkbox"/> Câble monopolaire |

Cure de hernie sous cœlioscopie

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Champ de cœlioscopie | <input type="checkbox"/> Solution anti-buée | <input type="checkbox"/> Mepilex® Border Post-op |
| <input type="checkbox"/> Champs supplémentaires | <input type="checkbox"/> Boîte à aiguilles | <input type="checkbox"/> Plateaux et bols |
| <input type="checkbox"/> Blouses opératoires | <input type="checkbox"/> Extracteur de lame | <input type="checkbox"/> Instrument monopolaire – pince |
| <input type="checkbox"/> Produits de gaze | <input type="checkbox"/> Plateau de transfert d'instruments | <input type="checkbox"/> Instrument monopolaire – dissecteur |
| <input type="checkbox"/> Seringues | <input type="checkbox"/> Bistouri sécurisé | <input type="checkbox"/> Ciseaux monopolaires |
| <input type="checkbox"/> Aiguilles | <input type="checkbox"/> Champ Time Out | <input type="checkbox"/> Trocarts |
| <input type="checkbox"/> Tubes d'insufflation | <input type="checkbox"/> Tapis anti-dérapant | <input type="checkbox"/> Canules universelles |
| <input type="checkbox"/> Aiguille de Veress | <input type="checkbox"/> Housse de caméra | <input type="checkbox"/> Câble monopolaire |
| <input type="checkbox"/> Kit d'aspiration et d'irrigation | <input type="checkbox"/> Instrument métallique | |
| <input type="checkbox"/> Filtre à fumée | <input type="checkbox"/> Sutures | |



Contactez votre représentant commercial Mölnlycke® pour personnaliser vos trousse. Il vous présentera également notre nouveau site portail des trousse qui vous permettra de créer et adapter vos trousse ainsi que d'évaluer vos commandes. Le portail permet un accès multi-utilisateurs personnalisé.



Des solutions de cœlioscopie personnalisées

Travailler ensemble pour des solutions qui créent des nouvelles normes de soins

Vous pouvez vous concentrer sur l'excellence de vos prestations de santé tout en protégeant vos ressources, et ce, avec l'aide de nos spécialistes dévoués et de notre gamme complète de produits novateurs :

- Un assortiment complet de champs, blouses opératoires et autres équipements de bloc opératoire de haute qualité
- Des gants chirurgicaux Biogel® techniques de haute qualité
- Des solutions de trousse composites ayant conquis le marché
- Des produits de traitement des plaies avancés, dotés de la fameuse technologie Safetac®
- Site portail des trousse qui vous permettra de créer et adapter vos trousse ainsi que d'évaluer vos commandes. Le portail permet un accès multi-utilisateurs personnalisé

Proving it every day

Dans tout ce que nous entreprenons chez Mölnlycke®, nous sommes guidés par un seul objectif : aider les professionnels de la santé à atteindre leur meilleur niveau. Et nous ambitionnons de le prouver au quotidien.

Découvrez notre assortiment de cœlioscopie sur www.molnlycke.be.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél: 03 286 89 50, Fax: 03 286 89 52.

Le nom et le logo Mölnlycke®, BARRIER®, Biogel®, Mepilex® and Safetac® sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés (BFSU00501709)


Mölnlycke®